


# تشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز وتغيير البطاريات

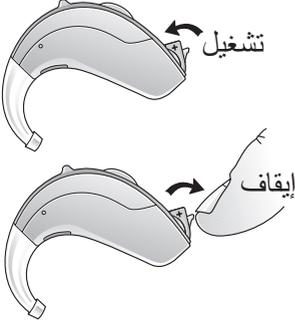


تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

تشغيل جهاز السمع

أغلق درج البطارية بالكامل لتشغيل جهاز السمع.

إيقاف تشغيل جهاز السمع

افتح درج البطارية حتى تسمع نقرة لإيقاف تشغيل جهاز السمع.

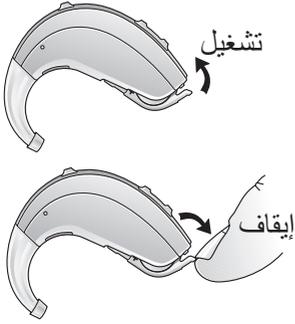


## تغيير البطاريات



عند انخفاض طاقة البطارية

• سوف يصدر جهاز السمع صوت تنبيه عند انخفاض طاقة البطارية.

• سوف يتكرر الصوت كل 15 دقيقة حتى يتم إيقاف تشغيل جهاز السمع تلقائياً.

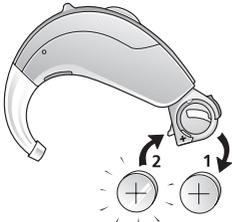

## تشغيل/ إيقاف تشغيل الجهاز وتغيير البطاريات (تتمة)

### لتغيير البطارية



• انزع المصق اللاصق الموجود على البطارية الجديدة.

• افتح درج البطارية.

• أزل البطارية التالفة عن طريق سحبها لأعلى.


• أدخل البطارية الجديدة في مكانها. وتأكد من

توجيه الجانب المسطح (الذي يوجد عليه

علامة +) لأعلى.

❗ للحفاظ على البطارية، تأكد من إيقاف تشغيل

جهاز السمع عند عدم استخدامه.

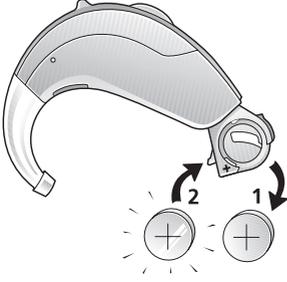

تم إعداد جهاز السمع ليصدر صوت تنبيه عندما

تحتاج البطارية إلى التغيير.

لا

نعم

تفاصيل الاتصال بمتخصص السمع: