

تركيب سماعة الأذن – أنبوب رفيع



1 ضع سماعة الأذن خلف أذنك ووجه الطرف اللين صوب رأسك.



2 أدخل الطرف اللين بلطف في قناة الأذن ووجه الطرف النهائي إلى الخلف.




3 قم بثني الحافة النهائية للخلف في تجويف الأذن.




4 تكون بذلك قد قمت بتركيب سماعة الأذن بشكل صحيح.

يُرجى ملاحظة استخدام يدك اليمنى، إذا كنت تتركب سماعة الأذن اليمنى، واستخدام يدك اليسرى، إذا كنت تتركب سماعة الأذن اليسرى.


تنظيف سماعة الأذن

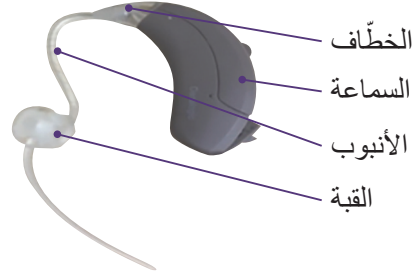


1 قم بفك الأنبوب في اتجاه حركة عقارب الساعة من مقدمة الخطاف الموجود أعلى السماعة. يحتوي الخطاف على مرشح لا يمكنك تمرير سلك التنظيف من خلاله.

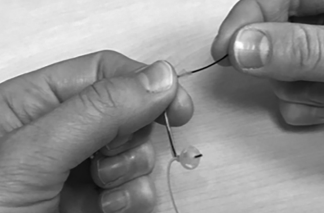

2 ادفع سلك التنظيف برفق عبر الأنبوب من أعلى إلى أسفل. وحرك سلك التنظيف خلاله حتى يصل إلى آخره.

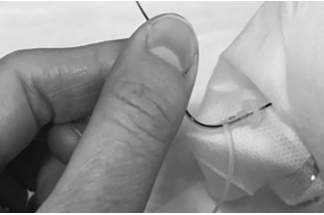

3 قم بإزالة أي ترسبات من نهاية الأنبوب ومسح القبة لإزالة أي شمع زائد.

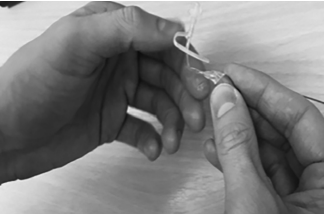

4 أعد تركيب الأنبوب مرة أخرى برفق في الخطاف، ثم أدركه عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يعود الأنبوب إلى مكانه الأصلي. واحرص على عدم ثني الأنبوب أو ربطه بشدة.

يُرجى ملاحظة أنه: يجب استبدال الأنابيب كل 4-6 أشهر