
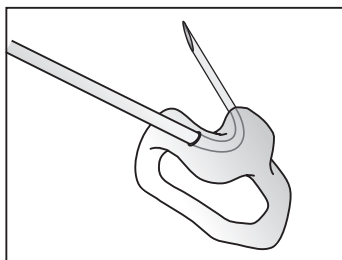
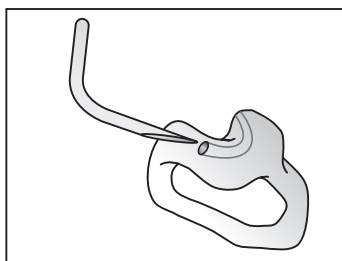
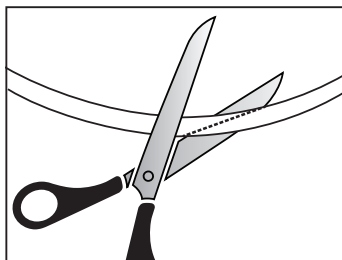



Как да смените тръбичката на шаблона за ухо

- 1 Откачете шаблона от слуховия апарат.
- 2 Отрежете приблизително последните 5см от предварително огънатата тръбичка, на място където има контурно отбелязване. Мушнете тръбичката през шаблона, докато тя се покаже от другия край.
- 3 Мушнете острото крайче на тръбичката през каналчето на шаблона от външната страна, както е показано на картинката, докато то се появи от другия край. Ако има 2 канала в шаблона, мушнете тръбичката през горния канал.
- 4 Издърпайте острото крайче на тръбичката през шаблона докато другият ѝ край е във вертикално положение и е плътно прилепнал към шаблона.

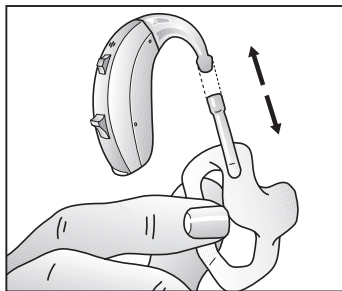


Как да смените тръбичката на шаблона за ухо (продължение)


- 5 Отрежете острия край колкото се може по-близо до шаблона. Уверете се, че неравните ръбове на тръбичката не се показват навън, тъй като това може да предизвика раздразнение в ухото.

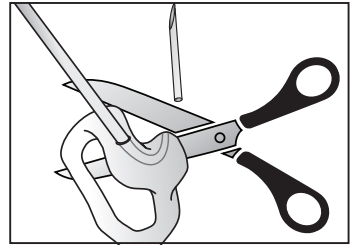

- 6 Сега трябва да регулирате дължината на тръбичките според вашето ухо. Поставете старата тръбичка, която вие отстранихте по-рано, до новата измерена тръбичка и отрежете. Или поставете слуховият апарат над ухото и отбележете мястото, където тя го пресича, както е показано на картинката и отрежете.

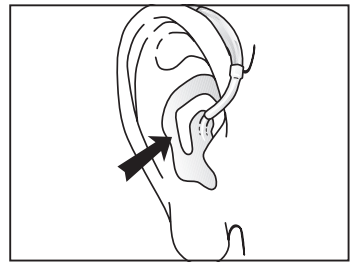

- 7 За да закрепите отново вашият слухов апарат към шаблона, стиснете горното крайче на тръбичката и закачете обратно шаблона към апарата.

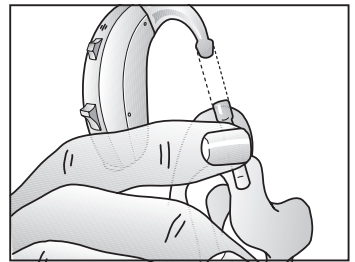

- i** С течение на времето, тръбичката може да се втвърди, обезцвети или да стане чуплива. Препоръчително е тя да се подменя поне веднъж на всеки 6 месеца. Ако имате някакви въпроси при смяната на тръбичката, моля свържете се с вашия местен аудиолог.