


# كيفية تغيير أنبوب قالب الأذن


1 افصل القالب عن جهاز السمع.




2 اقطع ما يقرب من 5 سم من الجزء الأخير من الأنبوب بصورة منحنية لتحصل على نهاية مدببة، ثم أدخل هذا بصورة لولبية في قالب الأذن حتى يخرج من الطرف الآخر.

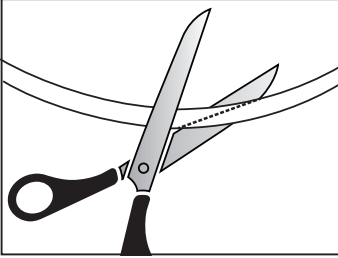


3 أدخل الطرف المشار إليه من خلال القناة في القالب من الخارج على النحو الموضح، حتى يظهر من الطرف الآخر. وإذا كانت لديك قناتان في القالب، فأدخل الأنبوب من خلال القناة العلوية.

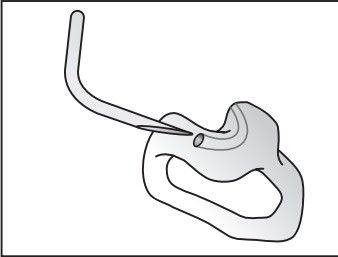


4 اسحب طرف الأنبوب المشار إليه عبر القالب حتى يصبح الطرف الآخر من الأنبوب عمودياً ومستقرًا بصورة مستوية على القالب.

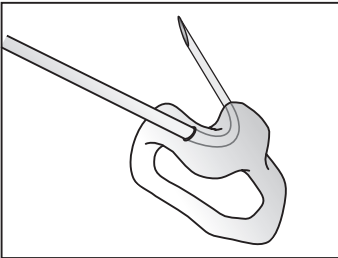


## كيفية تغيير أنبوب قالب الأذن (تتمة)

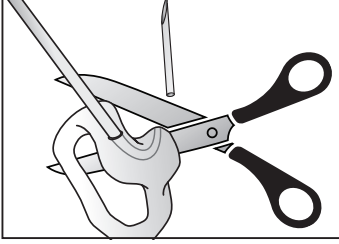

5 اقطع الطرف المشار إليه عند أقرب موضع ممكن من القالب. وتأكد من عدم بروز حواف خشنة في الأنبوب إلى الخارج لأن هذا يمكن أن يسبب تهيجًا في الأذن.

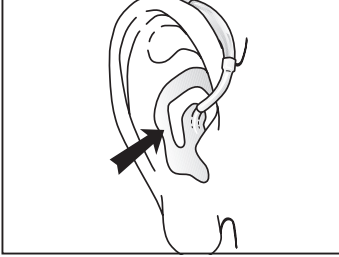

6 أنت الآن تحتاج إلى ضبط طول الأنبوب ليناسب أذنك. ضع قطعة الأنبوب القديمة، التي قمت بإزالتها مسبقًا، مع قياس الأنبوب الجديد الملائم ثم قم بالقطع. أو ضع جهاز السمع حول أذنك، وحدد النقطة التي يتخطى فيها الأنبوب جهاز السمع على النحو الموضح ثم قم بالقطع.

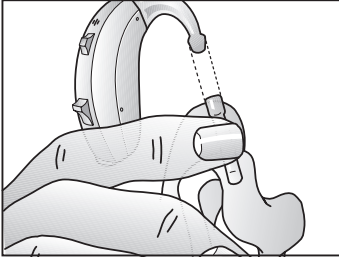

7 لإعادة توصيل جهاز السمع بالقالب، اضغط على الجزء العلوي من الأنبوب ثم أعد تركيب القالب والجهاز معًا.

**i** قد يصبح أنبوب قالب الأذن صلبًا أو هشًا أو مشوهًا مع مرور الوقت. لذا يوصى عادةً بتغيير الأنبوب مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. وإذا واجهتك أي مشكلات عند تغيير الأنبوب، فُيرجى الاتصال بقسم السمعيات المحلي القريب منك.