


细导音管

清洁细导音管和耳塞


- 1 在清洁前逆时针拧松细导音管，将其从助听器上取下。
- 2 用湿抹布擦拭细导音管和耳塞。
- 3 为了清除细导音管中的水气和碎屑，请将黑色清洁棒从耳塞另一端的细导音管插入。

i 如果组件变硬、变脆或扭结，则应更换细导音管和耳塞系统。

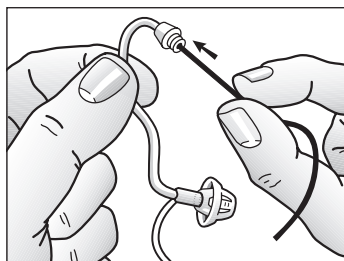

更换细导音管

- 1 逆时针拧松细导音管，将其从助听器上取下。
- 2 顺时针拧紧以安装用于替换的细导音管。

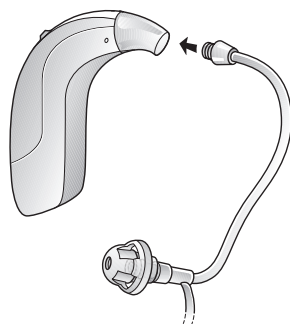

更换耳塞

建议由听力保健专业人员更换耳塞，因为耳塞更换不当可能会导致其掉入耳内。

听觉矫正专家联系方式：