

佩戴助听器 - 细管

1 将助听器放在耳后，软耳塞朝向头部。



2 将软耳塞轻轻推入耳道，尾部朝后。



3 将尾部向后折叠放入耳廓。




4 正确安装的助听器。





请注意，如要佩戴右侧助听器，请用右手；如要佩戴左侧助听器，请用左手。

清洁助听器

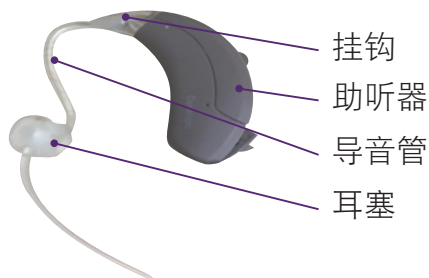

- 1 从助听器挂钩的正面顺时针拧下导音管。挂钩带有一个过滤器，清洁丝无法从中穿过。
- 2 将清洁丝从上至下轻轻地穿过导音管。将清洁丝完全穿过导音管。
- 3 清除导音管末端的所有碎屑，然后擦拭耳塞以清除多余的耳垢。
- 4 将导音管轻轻推回到挂钩上，然后逆时针旋转直到将导音管装回原位。注意不要让导音管扭结或拧得过紧。

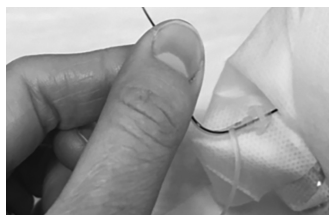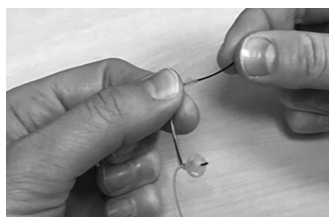

请注意：导音管应每 4-6 个月更换一次