
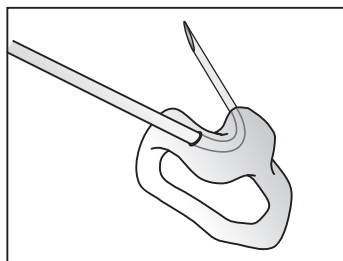
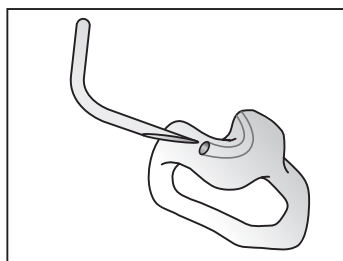
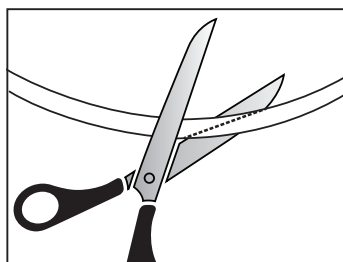



如何更换耳模的导音管

- 1 从助听器上拆下耳模。
- 2 将导音管预弯部分的后 5 厘米斜剪成锥形尖端。将其插入耳模并从另一端穿出来。
- 3 如图所示，将尖端从外侧插入耳模上的通道，直至从另一端穿出来。如果耳模上有 2 个通道，则将导音管从上部通道插入。
- 4 将导音管的尖端拉过耳模，直至导音管的另一端垂直紧贴耳模。

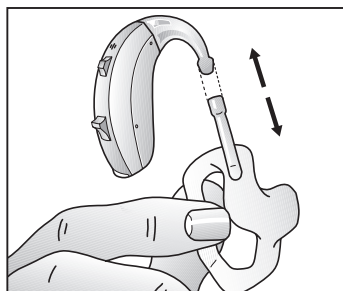


如何更换耳模的导音管（续）


- 5 从尽可能紧贴耳模的位置剪掉尖端。确保导音管没有露出粗糙的边缘，否则会刺激耳朵。

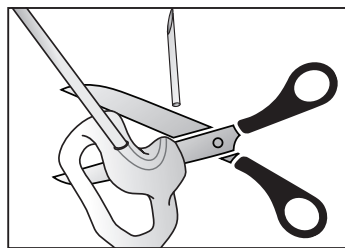

- 6 现在调整导音管的长度以适合您的耳朵。比着之前取下的旧导音管长度剪断新安装的导音管。或者将助听器戴到耳朵上，在其穿过助听器的位置做上标记（如图所示），然后剪断。

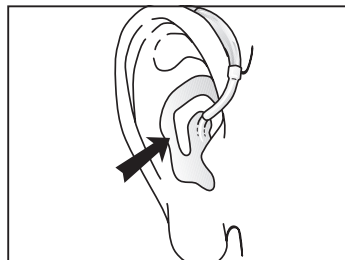

- 7 要将助听器重新安装到耳模上，请挤压导音管的顶部，然后将耳模和助听器装回原位。

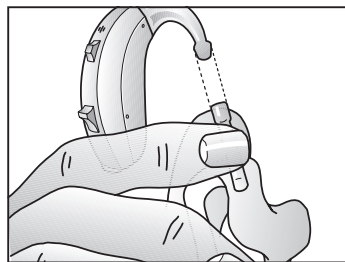

- i** 耳模和导音管可能会随时间而变硬、变脆或变色。通常建议至少每 6 个月更换一次。如果在更换导音管时遇到任何问题，请联系您当地的听觉学科室。