



ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਊਬ ਕਵਿੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ


1 ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਤੋ ਅਲੱਗ ਕਰੋ।

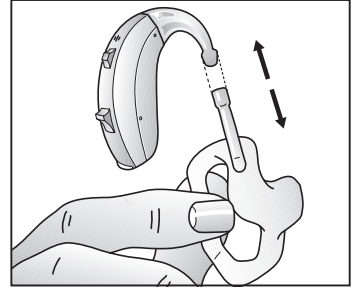


2 ਟਿਊਬਗਿ ਦੇ ਪਹਲਿਾਂ ਤੋ ਮੁੜੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਆਖਰੀ 5 ਸੈ ਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਰਿ ਤੱਕ ਕੱਟੋ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਚਿ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਲੰਘਾਓ ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ।

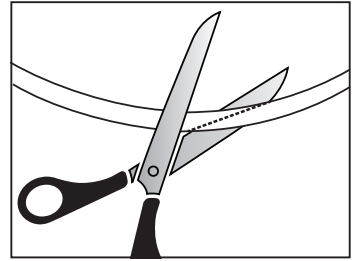

3 ਜਸਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਿਾਇਆ ਗਆ ਹੈ ਸਾਂਚੇ ਵਚਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਚਿ ਤਖਿ ਕੀਤੇ ਸਰਿ ਨੂੰ ਲੰਘਾਓ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਰਿ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਚੇ ਵਚਿ 2 ਚੈਨਲ ਹਨ ਤਾਂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਖਿਰਲੇ ਚੈਨਲ ਵਚਿ ਲੰਘਾਓ।

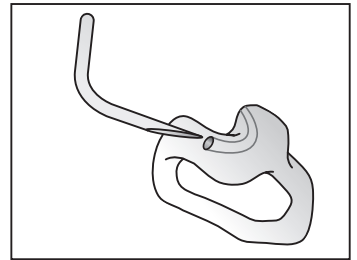


4 ਟਿਊਬਗਿ ਦੇ ਤਖਿ ਕੀਤੇ ਸਰਿ ਨੂੰ ਸਾਂਚੇ ਵਚਿ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਖਾਚੋ ਜਦੋ ਤੱਕ ਟਿਊਬਗਿ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰਿ ਖੜ੍ਹਵਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਟ ਫਟਿ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

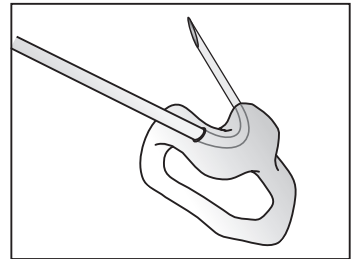


ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਉਬ ਕਵਿੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ (ਨਰਿੰਤਰ)


5 ਤਖਿ ਸਰਿ ਨੂੰ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਜਨਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋ ਹੋ ਸਕੇ ਕੱਟ ਦਾਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕੀ ਟਾਉਬ ਦੇ ਖੁਰਦਰੇ ਸਰਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਰਹਦਿ ਹਨ ਕਾਉਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਵਚਿ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

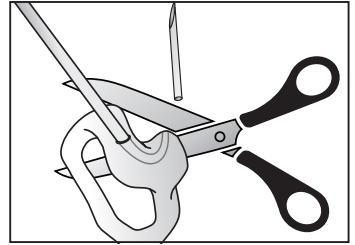

6 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੀ ਫਟਿਗਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਉਬਗਿ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟਾਉਬਗਿ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁਕੜੇ, ਜਸਿਨੂੰ ਤੁਸੀ ਪਹਲਿਾਂ ਹਟਾ ਦਾਉਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਵੀ ਫਾਟਿ ਕੀਤੀ ਟਾਉਬ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਕੱਟ ਦਾਓ। ਜਾਂ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ, ਜਸਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਿਅਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਦਿ ਦੇ ਨਸ਼ਿਨ ਲਗਾਓ ਜਬਿ ਇਹ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟ ਦਾਓ।

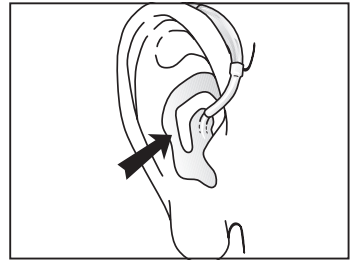

7 ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਟਾਉਬ ਦੇ ਸਰਿ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਦਾਓ।

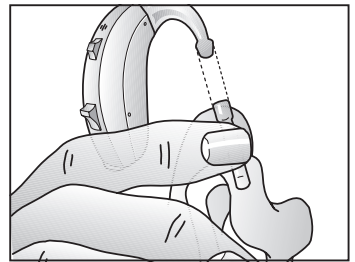

i ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਦੀ ਟਾਉਬਗਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੁਰਭੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੰਗੀਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਉਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਚਿ ਕਸਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਓਲੋਜੀ ਵਭਿਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।