

ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਗਿ ਟਊਬ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ - ਸਲਮਿ ਟਊਬ

1 ਮੁਲਾਇਮ ਸਰਿ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਿ ਵੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀਅਰਗਿ ਏਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਾਛੇ ਲਗਾਓ।



2 ਮੁਲਾਇਮ ਸਰਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧੱਕੋ ਇਸਦਾ ਪਛਿਲਾ ਪਾਸਾ ਪਛਿਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



3 ਏਡ ਦੇ ਪਛਿਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਾਓ।




4 ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਿ ਕੀਤੀ ਏਡ।





ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੀਅਰਗਿ ਏਡ ਨੂੰ ਫਾਟਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ, ਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੀਅਰਗਿ ਏਡ ਨੂੰ ਫਾਟਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਗਿ ਏਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ

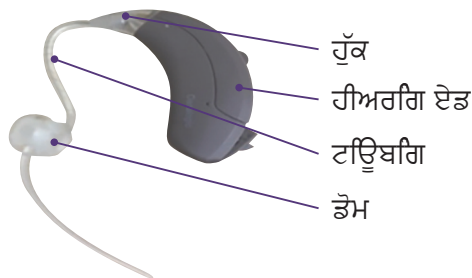

- 1 ਟਰਿਊਬਗਿ ਨੂੰ ਹੀਅਰਗਿ ਏਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁਮਾਓ। ਹੁੱਕ ਦੇ ਵੱਚਿ ਇਕ ਫਲਿਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ।
- 2 ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਟਰਿਊਬਗਿ ਦੇ ਵੱਚਿ ਸਖਿਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹਲਕਾ ਜ਼ਹਿ ਧੱਕੋ। ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਵੱਚਿ ਲੰਘਾ ਦਿਓ।
- 3 ਟਰਿਊਬਗਿ ਦੇ ਸਰਿ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਸਿ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਸਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡੋਮ ਨੂੰ ਪੂੰਝੋ।
- 4 ਟਰਿਊਬਗਿ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜ਼ਹਿ ਵਾਪਸ ਹੁੱਕ ਤੇ ਧੱਕੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਸ਼ਾ ਵੱਚਿ ਘੁਮਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਿਊਬਗਿ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਚਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਟਰਿਊਬ ਨੂੰ ਵੱਲ ਪੈਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

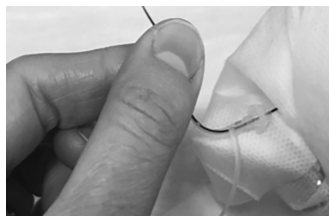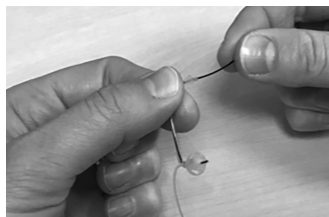

ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਟਰਿਊਬਗਿ ਨੂੰ ਹਰ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਲਈ ਸਹੀ ਵਕਿਲਪ

danalogic GN